



LANÇAMENTO



✓ BioActive

UBEset

Os produtos UBEset são indicados para procedimentos minimamente invasivos pela técnica de Endoscopia Biportal Unilateral (UBE) da coluna vertebral, seja no segmento cervical, torácico, lombar e/ou toracolumbar para o tratamento de doenças degenerativas, tais como descompressão neural, descompressão de canal, descompressão foraminal, remoção de hérnia de disco, laminectomia, descompressão sublaminar colateral, discectomia, foraminotomia e facetectomia, descompressão indireta por restauração do espaço discal e redução da espondilolistese.





01

FUNCIONAMENTO

Cada Kit é composto por:

- Uma cânula de debridamento (98 modelos com variações das pontas, proteções, diâmetros e encaixes) que deverá ser utilizada para cisão ou remoção de tecidos ósseos.
- Um eletrodo de plasma (4 modelos com variações da ponta) que deverá ser utilizado para a realização de ablação/corte/ coagulação de tecidos moles.
- Um Equipo (5 modelos – LV/FL/RZ/ST/4V), que deverá ser utilizado para a realização de irrigação no local do procedimento.
- Uma cânula de acesso (2 modelos – Angulado e Rosqueado) que deverá ser utilizada para fornecer o canal de acesso para os demais instrumentais.

02

COMPOSIÇÃO


Cada um dos modelos comerciais do UBEset é composto por **4 componentes**:

- Cânula de debridamento ósseo (1 un),
- Eletrodo de Plasma (1 un),
- Equipo (1 un),
- Cânula de acesso (1 un).

03


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cada modelo comercial do UBEset corresponde a um tipo específico de produto.

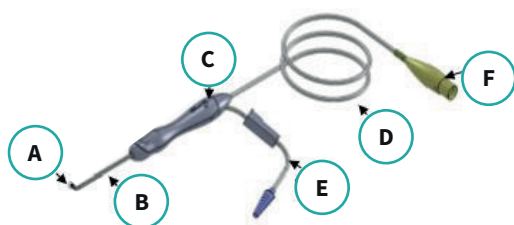

Com Sucção (Ponta Star)

- A Ponta** - Região da superfície ativa, pela qual a energia de rádio frequência é aplicada no corpo humano com o objetivo de ablar/cortar/coagular tecidos moles.
- B Haste Rígida** - Haste de aço inox com revestimento de um isolamento.
- C Manopla** - Projetada para permitir que a direção seja no sentido do conector para a ponta.

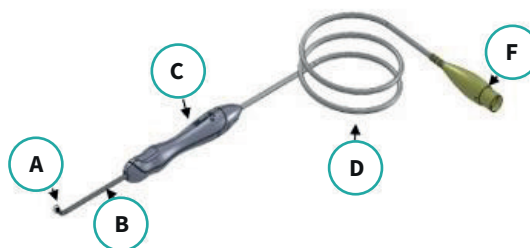

Sem Sucção (Ponta Agulha)

- D Cabo** - Cabo de conexão entre o produto e o equipamento eletrocirúrgico
- E Linha de Sucção** - Mangueira para a realização da função de sucção
- F Conector** - Utilizado para realizar a interface com o equipamento eletrocirúrgico





G

ZOOM NAS PONTAS



Ponta Agulha Sem Sucção **Ponta Star Com Sucção**

H

CÂNULAS DE ACESSO

Modelos:



Angulada **Roscada**

i

CÂNULA DE DEBRIDAMENTO

O produto pode ser utilizado tanto por via percutânea como por via endoscópica. O UBEset está disponível em diferentes comprimentos para melhor ergonomia do cirurgião e com diversas opções de pontas.

Encaixes:

LS / LV / ST / DY / SF / RZ / SN

Diâmetros:

3 mm / 4 mm / 5 mm

Comprimentos:

128 mm / 138 mm

Tipo de Pontas das Cânulas de debridamento

COR	Cortante
CORL	Cortante com proteção lateral
DIA	Diamantada
DIAPL	Diamantada com proteção lateral
OVA	Oval
OVAPL	Oval com proteção lateral

Tipo do Equipo

LV	Modelo LV
FL	Modelo FL
RZ	Modelo RZ
ST	Modelo ST
4V	Modelo 4V

