



✓ BioActive

DB Vision

Os produtos DB Vision compõem um sistema com variações de cânulas e equipos, e são projetados para procedimentos biportais unilaterais, permitindo cisão, remoção e irrigação de tecidos. Os produtos são estéreis e de uso único.

Imagens meramente ilustrativas

RMS: 80951059029

Catálogo de Produto



01

FUNCIONAMENTO

Cada modelo comercial do DB Vision é composto por uma cânula de debridamento, um equipo e uma cânula de acesso roscada e um auto-afastador, sendo que a cânula de debridamento deverá ser utilizada para cisão ou remoção de tecidos ósseos, o equipo deverá ser utilizado para a realização de irrigação no local do procedimento e as cânulas deverão ser utilizadas para fornecer o canal de acesso biportal unilateral para os demais instrumentais.

02

INDICAÇÃO DE USO

Os produtos do DB Vision, deverão ser utilizados em procedimentos minimamente invasivos pela técnica de Endoscopia Unilateral Biportal (UBE) da coluna vertebral para o tratamento de patologias degenerativas da coluna vertebral. Essa técnica utiliza dois pequenos portais de acesso, um para a introdução de uma câmera endoscópica que permite visualização direta e aumentada do local de trabalho, e outro para os instrumentos cirúrgicos.

03

CÂNULA DE DEBRIDAMENTO

O produto pode ser utilizado tanto por via percutânea como por via endoscópica. Está disponível em diferentes comprimentos com diversas opções de pontas.

Encaixes:

LS / LV / ST / DY / SF / RZ / SN

Diâmetros:

3 mm / 4 mm / 5 mm

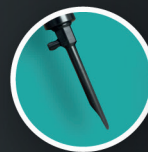
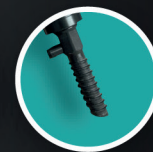
Comprimentos:

128 mm / 138 mm

04

CÂNULAS

Modelos:

**Auto-Afastador
(Self-retractor)****Cânula de
Acesso Roscada****Tipo de Pontas das
Cânulas de debridamento**

COR	Cortante
CORL	Cortante com proteção lateral
DIA	Diamantada
DIAPL	Diamantada com proteção lateral
OVA	Oval
OVAPL	Oval com proteção lateral

Tipo do Equipo

LV	Modelo LV
FL	Modelo FL
RZ	Modelo RZ
ST	Modelo ST
4V	Modelo 4V

